

KOFFERDAMTECHNIK

Rubber Dam Technique

Technologie für dentale Perfektion - inspiriert von der Natur

Technology for dental perfection – inspired by nature

Sicher ist sicher: „Kofferdam“

Better safe than sorry: „Rubber Dam“



Gemeinsam für gesunde Zähne

Together for healthy teeth

Sympatic Dam – Kofferdam aus Naturlatex & latex-frei
 Sympatic Dam – rubber dam made of natural latex & free of latex



KKD® Sympatic Dam Premium

- 100% Naturlatex
- puderfrei
- hohe Belastbarkeit
- hohe Reißdehnung
- niedriger Proteingehalt
- Zugfestigkeit: 24,0 MPa (min.)
- Reißdehnung: 700% (min.)
- Proteingehalt: weniger als 50 Microgramm/dm²
- Pulver-Restmenge: weniger als 2,0 Milligramm pro Blatt
- vorgeschritten

- 100% natural latex
- powder-free
- extremely resilient
- high tear tolerance
- low protein
- longitudinal strength: 24,0 MPa (min.)
- ultimate elongation: 700% (min.)
- protein content less than 50 micrograms/dm²
- powder residue: less than 2.0 milligrams per sheet
- pre-cut

Extrem kompakter Kofferdam, speziell für die Endodontie

Very compact rubber dam especially for endodontics

REF 57137

36 Blatt/ sheets (regular)
150 x 150 mm (6" x 6")

Stärke (mm)/ Thickness (mm) 0,28



dünn/ thin mittel/ medium schwer/ heavy

REF 57124 ● REF 57125 ● REF 57126 ●
REF 44111 ● REF 44111 ● REF 44112 ●

REF 57120 ● REF 57121 ● REF 57122 ●
REF 44100 ● REF 44101 ● REF 44102 ●

REF 57105 ● REF 57106 ● **NEU**

36 Blatt/ sheets (regular)
150 x 150 mm (6" x 6")

52 Blatt/ sheets (small)
130 x 130 mm (5" x 5")



Stärken (mm)/ Thicknesses (mm)
dünn/ thin 0,14 | mittel/ medium 0,18-0,20
schwer/ heavy 0,22

Spearmint
silk-blue

geruchlos/ plain
blau/ blue

Mint
grün/ green

Mint
schwarz/ black

KKD® Sympatic Dam „NON-LATEX“ Premium

Aus Polyisopren, einem Material, das Gummi sehr ähnelt. Es hat eine ähnliche Polymerstruktur und physikalische Eigenschaften wie Naturgummi, aber ohne die potentiellen Allergene des Latex-Proteins. Als hochwertiges Produkt konzipiert und entwickelt, ist der NON-Latex Kofferdam sehr reißfest (eine Mindestdehnung von 7 x des ursprünglichen Stanzloches), sowie von großer Zugfestigkeit (mehr als 20 MPa) und hat ein gutes Modul-Niveau (1.0 MPa), all das was eine sehr wichtige Rolle in der praktischen und effizienten Anwendung des Kofferdam spielt.

- Maße: 150 x 150 mm (6" x 6")
- Reißdehnung: 700 % (min.)
- Pulver-Restmenge: weniger als 2,0 Milligramm pro Blatt

lila/ lilac

15 Blatt/ sheets

REF 57057

30 Blatt/ sheets

REF 57057B

Stärke (mm)/ Thickness (mm)

0,25

KKD® Sympatic Dam

Kofferdam aus puderfreiem Latex

- extrem widerstandsfähig und reißfest
- hautfreundlich
- in lichtgeschützter Vakuumverpackung
- hygienische und verlängerte Lagerung
- Bubble Gum
- puderfrei
- vorgeschnitten 150 x 150 mm (6" x 6") oder 130 x 130 mm (5" x 5")

Rubber Dam made of powder-free latex

- extremely resistant, tough and hard to tear
- protects against the natural decomposition due to air oxygen
- guarantees hygienic stocking
- in light-proofed vacuum packing
- for more hygienic and longer storage
- Bubble Gum
- powder-free
- pre-cut, 150 x 150 mm (6" x 6") or 130 x 130 mm (5" x 5")

36

Blatt/ sheets (regular)
150 x 150 mm (6" x 6")

2x
36

Blatt/ sheets (Advantage)
150 x 150 mm (6" x 6")

52

Blatt/ sheets (small)
130 x 130 mm (5" x 5")

Kids

Stärken (mm)/ Thicknesses (mm)

dünn/ thin 0,125-0,175 | mittel/ medium 0,175-0,228

schwer/ heavy 0,228-0,305 | x-schwer/ x-heavy 0,305-0,350

The NON-Latex dental dam is made from Polyisoprene, a material which very closely resembles rubber. It has a similar polymer structure and physical properties as natural rubber minus the potential allergen of latex protein. Designed and developed as a superior product, the NON-Latex dental dam offers a high tear tolerance (a minimum expansion of 7 times from the original punch hole), great tensile strength (above 20 MPa) and a good modulus level (1.0 MPa), all of which are crucial in the practical and efficient application of the dental dam.

- measurements: 150 x 150 mm (6" x 6")
- ultimate elongation: 700 % (min.)
- powder residue: less than 2.0 milligramms per sheet



dünn/ thin

mittel/ medium

schwer/ heavy

x-schwer/ x-heavy

REF 07106 ●

REF 09015 ●

REF 07127 ●

REF 09007 ●

REF 07123 ●

REF 09003 ●

REF 07130 ●

REF 09004 ●

REF 07132 ●

REF 09009 ●

REF 07135 ●

REF 09008 ●

REF 07128 ●

REF 09010 ●

REF 07117 ●

REF 09013 ●

REF 44122 ●

REF 07118 ●

REF 09018 ●

REF 07113 ●

REF 09011 ●

REF 44121 ●

REF 07109 ●

REF 09012 ●

REF 44120 ●

- exzellenter Kontrast bei Fotoaufnahmen und Endo
- excellent contrast for photographing and Endo

schwarz/ black

blau/ blue

grün/ green

hell/ light


lila/ lilac

hellblau/ light blue

rosa/ pink

**KKD® Kofferdam Klammern „triColor Antireflect“/
 KKD® Rubber Dam Clamps „triColor Antireflect“**

Hochwertige Spezialklammern mit zuverlässig konstanter Spannung.
 Je nach Anwendungsbereich in drei verschiedenen Farbkodierungen/
 High-quality special clamps with constant tension.
 in 3 different colour-codings according to scope:

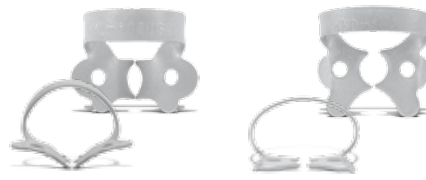

1A*
REF 02212

2A
REF 02214



2AT
REF 02254



4
REF 02204



8
REF 02232



8A
REF 02233



0
REF 02210



1
REF 02211



2
REF 02213



13A
REF 02235



14A*
REF 02237



W26
REF 02255






00
REF 02208



W29
REF 02225



212
REF 02202
Für labiale Karies
for labial caries

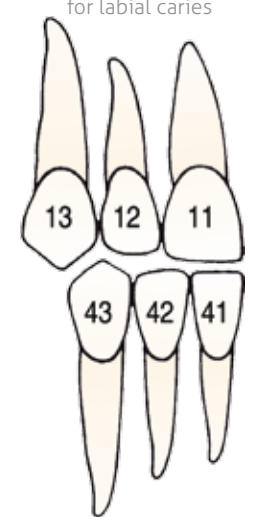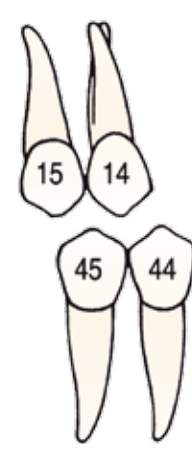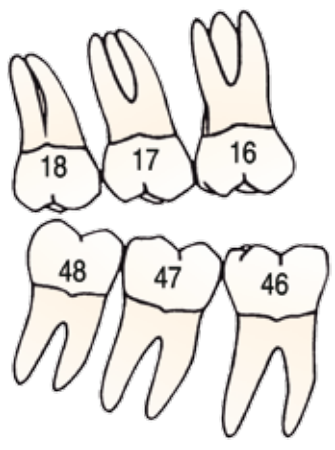

3
REF 02230



7
REF 02231



8A
REF 02233



0
REF 02210



1A*
REF 02212



212
REF 02202



12A
REF 02234



14*
REF 02236



14A*
REF 02237



2
REF 02213




2A
REF 02214



W2
REF 02220



W3
REF 02221

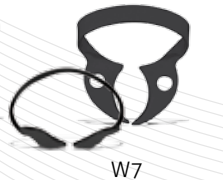


W7
REF 02250




W8A
REF 02256



W2
REF 02220

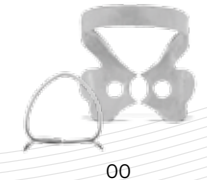

00
REF 02208

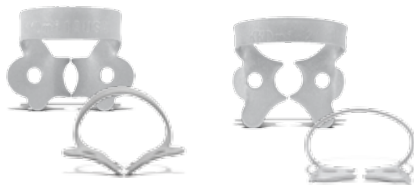

1A*
REF 02212

2A
REF 02214



2AT
REF 02254

! Matte, antireflektierende Ausführung. Besonders empfehlenswert bei der Verwendung von CEREC, Mikroskop oder Lupenbrille
Matt finished, anti-reflecting surface. Especially suited for users of CEREC, microscopes or magnifier glasses



0
REF 02210



0
REF 02210



1
REF 02211



4
REF 02204



8
REF 02232



8A
REF 02233



9
REF 02209
Für labiale Karies
for labial caries



W29
REF 02225



00
REF 02208






12A
REF 02234



14A*
REF 02237



W26
REF 02255

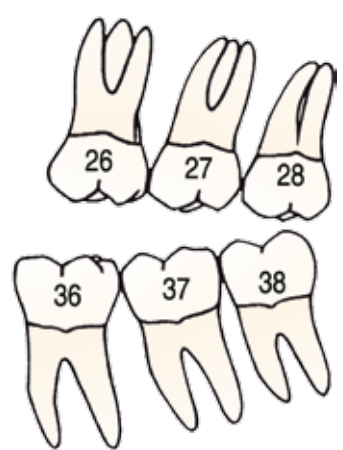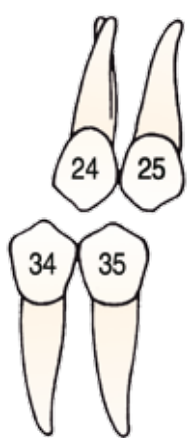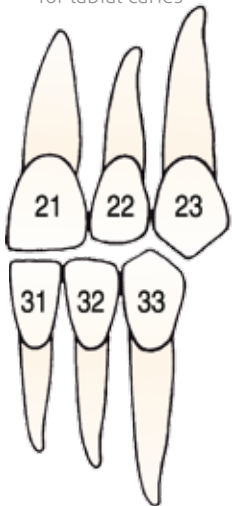

9
REF 02209



0
REF 02210



1A*
REF 02212



3
REF 02230



7
REF 02231



8A
REF 02233



0
REF 02210



2
REF 02213



2A
REF 02214



13A
REF 02235



14*
REF 02236



14A*
REF 02237



W2
REF 02220



00
REF 02208



W3
REF 02221



W7
REF 02250



W8A
REF 02256

* unterentwickelt / mit reduzierter Krone
undersized / reduced crown

Rahmen I Frames

Metallrahmen nach Young/ Made of metal- type Young

- Sicheres Halten des Kofferdams
- Schaffen geordnete und übersichtliche Platzverhältnisse
- keine Einschränkungen während der Behandlung
- hold the rubber dam firmly
- for a clear operating situation
- do not disturb during the treatment



Erwachsenengröße
for adults
REF 05818



Kindergröße
for children
REF 05819



Erwachsenengröße
for adults
REF 05818B




Kindergröße
for children
REF 05819B

Mit
schwarzer DLC
Beschichtung!
with black DLC
coating!

Kunststoffrahmen nach Young/ Made of plastic - type Young


- Erwachsenengröße
- strahlendurchlässig
- autoklavierbar
- for adults
- radiolucent
- autoclavable

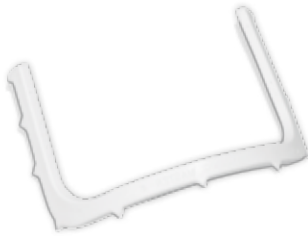

REF 07048

Kunststoffrahmen nach Nygard-Ostby (Haifischmaul)/ Made of plastic – type Nygard-Ostby (shark)

- hält den Kofferdam vom Gesicht fern
- strahlendurchlässig
- autoklavierbar
- keeps the dam away from the face
- radiolucent
- autoclavable

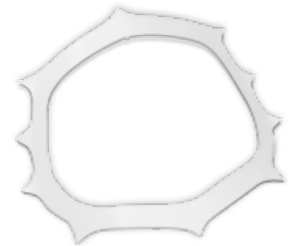

REF 07049

KKD® Klammern „Standard“/ KKD® Clamps „Standard“

Hochwertige Edelstahlklammern mit zuverlässig konstanter Spannung zur Fixierung des Kofferdams am zu behandelnden Zahn.

High-quality stainless steel clamps with constant tension for fixing the rubber dam onto the tooth to be treated.

Anterior



9
REF 52209
Für labiale Karies/
for labial caries



212
REF 52202
Für labiale Karies/
for labial caries

Prämolaren/ Premolars



00
REF 52208
Klammer für kleine Prämolaren mit dünnem Zahnhals
for small premolars with thin tooth neck



0
REF 52210
Klammer für Prämolaren mit dünnem Zahnhals
for premolars with thin tooth neck



1
REF 52211
Standardklammer für obere Prämolaren
standard clamp for upper premolars



1T
REF 52251
wie # 1 mit Microverzahnung für verbesserten Halt am Zahn
as # 1 with micro serration for better grip on the tooth



1A
REF 52212
Klammer für Prämolaren & unterentwickelte Prämolaren mit reduzierter Zahnkrone
for premolars & undersized premolars with thin tooth neck and reduced crown



2
REF 52213
Standardklammer für untere Prämolaren/
standard clamp for lower premolars

Prämolaren/ Premolars



2T
REF 52253
wie # 2 mit Micro-
verzahnung für
verbesserten Halt
am Zahn/ as # 2
with micro serration
for better grip on the
tooth



2A
REF 52214
Klammer für
Prämolaren mit
dickem Zahnhals/ for
premolars with thick
tooth neck



2AT
REF 52254
wie # 2A mit
Microverzahnung für
verbesserten Halt
am Zahn/ as # 2A
with micro serration
for better grip on the
tooth

Molaren/ Molars



3
REF 52230
Für kleine, untere
Molaren/ for small,
lower molars



4
REF 52204
Für kleine, obere
Molaren/ for small,
upper molars



7
REF 52231
Standardklammer
für untere Molaren/
standard clamp for
lower molars

Molaren/ Molars



8
REF 52232
Standardklammer
für obere Molaren/
standard clamp for
upper molars



8A*
REF 52233
Wurzelklammer für
obere und untere
Molaren/ root clamp
for upper and lower
molars



12A
REF 52234
Für Molaren im 2.
und 4. Quadranten/
for molars in the 2. +
4. quadrant



13A
REF 52235
Für Molaren im 1.
und 3. Quadranten/
for molars in the 1. +
3. quadrant



14*
REF 52236
Klammer für
teildurchbrochene,
runde, schräg-
stehende Molaren/
for partially erupted,
large, inclined
molars



14A*
REF 52237
Klammer für teil-
durchbrochene,
große, runde,
schrägstehende
Molaren/ for
partially erupted,
big, round, inclined
molars

* Für unterentwickelte Molaren und Molaren mit reduzierter Krone/
for undersized molars and molars with reduced crown

KKD® Klammern „Standard“ ohne Flügel – wingless clamp/ KKD® Clamps „Standard“ without wings – wingless clamp

Prämolaren/ Premolars



W1
REF 52219
Standardklammer
für obere
Prämolaren/
standard clamp for
upper premolars



W2
REF 52220
Standardklammer
für untere
Prämolaren/
standard clamp for
lower premolars



W29
REF 52225
Universalklammer
für obere
Prämolaren/
universal clamp for
upper premolars

Molaren/ Molars



W26
REF 52255
Universalklammer
für obere Molaren/
universal clamp for
upper molars



W3
REF 52221
Standardklammer
für kleine untere
Molaren /
standard clamp for
small lower molars



W7
REF 52250
Standardklammer
für untere Molaren/
standard clamp for
lower molars



W8A
REF 52256
Wurzelklammer für
obere und untere
Molaren/ root
clamp for upper
and lower molars

Kofferdam Grundausrüstung | RUBBER DAM Starter Kit

KKD® Kofferdam Starter Kit – „triColor Antireflect“ ... alles was man braucht
KKD® Rubber Dam Starter Kit - „triColor Antireflect“ ... everything you need



REF 055945

Set bestehend aus:

- Lochzange
- Klammerzange
- Sympatic Dam blau/medium – 36 Blatt
- Metallrahmen für Erwachsene
- Lochschablone
- Servietten
- Kofferdam Gleitmittel
- Variboard mit 8 KKD® „triColor Antireflect“ Klammern (Prämolar: 0/2/2A/1A – Molar: 7/12A/13A/14A)
- Kofferdam Leitfaden

Set including:

- punch
- clamp forceps
- Sympatic Dam blue/medium – 36 sheets
- metal frame for adults
- template
- napkins
- rubber dam lubricant
- Variboard with 8 KKD® „triColor Antireflect“ clamps (premolars: 0/2/2A/1A – molars: 7/12A/13A/14A)
- instruction manual

KKD® ENDO-Kit – „triColor Antireflect“



REF 055975

Set bestehend aus/ Set including:

- Klammerzange „Antireflect“
- Sympatic Dam schwarz/medium – 36 Blatt
- Metallrahmen für Erwachsene - schwarz
- Variboard mit 8 KKD® „triColor Antireflect“ Klammern in schwarz (nach Wahl)
- clamp forceps „Antireflect“
- Sympatic Dam black/medium – 36 sheets
- metal frame for adults - black
- Variboard with 8 KKD® „triColor Antireflect“ clamps in black (selectable)

Maximaler Kontrast
Maximum contrast

Klammersortimente I Clamp Assortments

KKD® „Standard“
Grundsoriment für den Einsteiger/
Basic assortment for beginners

Prämolar: 0/2/2A/1A
Molar: 7/12A/13A/14A
premolars: 0/2/2A/1A
molars: 7/12A/13A/14A
REF 521995



KKD® „triColor Antireflect“
für CEREC-, Mikroskop- und Lupenverwender/
for users of CEREC, microscopes and magnifiers



Prämolar: 0/2/2A/1A
Molar: 7/12A/13A/14A
premolars: 0/2/2A/1A
molars: 7/12A/13A/14A
REF 021995



Prämolar: 00/2A/2AT
Molar: W3/3/8A/14/14A
premolars: 00/2A/2AT
molars: W3/3/8A/14/14A
REF 421995

Kids



Anterior: 212
Prämolar: 0/1/1A/2/2A
Molar: 3/7/8/8A/12A/13A/14/14A
anterior: 212
premolars: 00/2A/2AT
molars: 3/7/8/8A/12A/13A/14/14A
REF 021985

Klammerboards für Kofferdamklammern I Clamp Boards



KKD® Variboards

- Stabile Klammerboards aus Kunststoff in drei verschiedenen Größen
- zur zweckmäßigen und übersichtlichen Klammerablage
- variables Steckhülensystem zur individuellen Einteilung des Boards
- klammerschonendes Board-Design ohne Deformationsgefahr für die Klammer-Kontaktflächen
- sterilisierbar - auch mit Klammern - bis 140 °C
- einfache und hygienische (fingerkontaktfreie) Klammerabnahme

- for an appropriate, clear clamp storage
- individually convertible
- a new board design eliminating any risk of deformation for clamp contact points
- sterilisable - even with clamps - up to 140 °C
- easy, hygienic (finger contact free) clamp removal




Steckhülsten/ caps
je 4 St./ ea. 4 pcs.

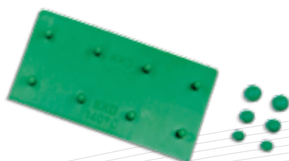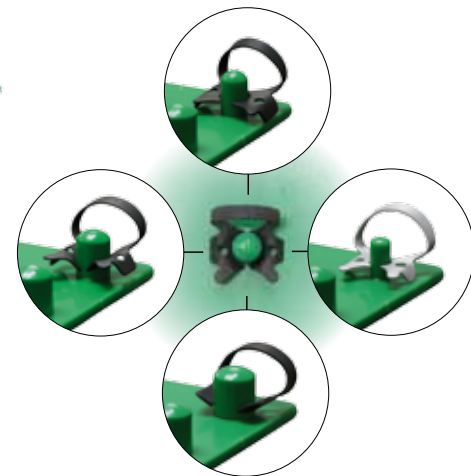

KKD® Variboard Typ 1
Für 8 Klammern - Maße: 110 x 55 mm
Inkl. je 2 Steckhülsten 6,5 / 8 / 9,5 mm Ø
For 8 clamps, dimensions: 110 x 55 mm
incl. ea. 2 caps 6.5 / 8 / 9.5 mm Ø

REF 05501

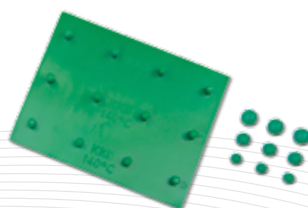

KKD® Variboard Typ 2
Für 12 Klammern - Maße: 110 x 85 mm
Inkl. je 3 Steckhülsten 6,5 / 8 / 9,5 mm Ø
For 12 clamps, dimensions: 110 x 85 mm
incl. ea. 3 caps 6.5 / 8 / 9.5 mm Ø

REF 05502



KKD® Variboard Typ 3
Für 20 Klammern - Maße: 140 x 110 mm
Inkl. je 5 Steckhülsten 6,5 / 8 mm Ø und
4 Steckhülsten mit 9,5 mm Ø
For 20 clamps, dimensions: 140 x 110 mm
incl. ea. 5 caps 6.5 / 8 mm and 4 caps 9.5 mm Ø
REF 05503

Lochzangen | Punches



- Qualitativ hochwertige Instrumente aus rostfreiem Stahl
- Verschiedene Stanzgrößen für jederzeit korrekte Perforation vom kleinsten Frontzahn bis hin zum größten Molaren
- Hervorragende Mechanik für sauber gestanzte und scharfe Perforation im Kofferdam
- the excellent mechanism guarantees a perfect, clean-cut and sharp perforation of the rubber dam
- range of different hole sizes – providing the correct perforation for the smallest anterior tooth to the largest molar
- top-quality instruments made of stainless steel

Nach Ivory/ Type Ivory

REF 05707



Nach Ainsworth/ Type Ainsworth

für Kofferdam mit starkem Rahmen z.B OptraDam/ for Rubber Dam with thick frames, e.g. OptraDam

REF 05706



Klammerzangen | Clamp Forceps

- Handgefertigte Präzisionsinstrumente aus rostfreiem Stahl
- gewährleisten exaktes Platzieren und sicheres Fixieren der Klammern beim Anlegen sowie leichtes Lösen der Zange aus der angelegten Klammer
- erlauben unproblematisches Versetzen der Klammer, da sie um jeden Klammerbügel reichen

- precision tooling permits any clamp to be easily carried and positioned on the tooth, as well as easy removing of the forceps out of the positioned clamp
- it reaches around the bow of any clamp without tilting, important when necessary to reverse a clamp on a tooth
- made of stainless steel



matt | matt finished
matt | matt finished

„MAXI“ (+3 mm)

REF 05708
REF 05709



schwarz / „Antireflect“ – ideal für CEREC-,
Mikroskop- und Lupenverwender. Mit DLC-Beschichtung.
black / „Antireflect“ - especially suited for users of CEREC,
microscopes and magnifiers. With DLC-coating.

REF 02201

Zubehör | Accessories

Heidemann-Spatel/ Spatula Heidemann



PFI-HS2
Zum Abschieben des Kofferdams von den Klammerflügeln./ For pushing the rubber dam off from the clamp wings.
2,6 - stumpf | blunt
REF 11968



Metzenbaum-Schere/ Scissors Metzenbaum



S-M3; L: 12 cm
Abgerundeter Scherenkopf, dadurch keine Verletzungsgefahr./ Rounded tips in order to avoid injuries.
gerade, abgerundet | straight, rounded
REF 12907



KKD® DamFix

Die Alternative zur Kofferdamklammer!
Einwegprodukt in praktischer Spenderdose.
Länge: 4 m.
An alternative to the conventional clamp method. Disposable.
Dispenser box.
Length: 4 m.




orange (large)
2,0 mm Ø
REF 09051

gelb/ yellow (small)
1,5 mm Ø
REF 09050



Lochschablone und Stempel/ Template and Stamp

- Zum Markieren der Zahnposition auf der Kofferdammembrane
- Markierungen geben den korrekten Abstand der Perforationen vor
- Stempel und Lochschablone zeigen die Positionen aller bleibenden Zähne und Milchzähne
- aids to more accurate marking of tooth positions on dental dam
- give the correct distance of the perforations
- for marking the tooth position on the rubber dam membrane

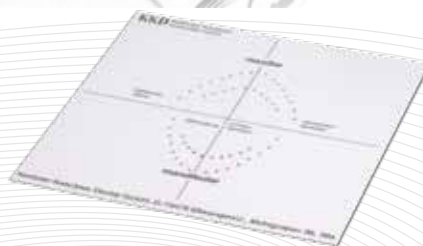

KKD® Lochschablone/ template
REF 07051



KKD® Stempel/ stamp
REF 07053

Zubehör | Accessories

KOOL DAMTM



Lichthärtendes Material zur Abdichtung undichter Kofferdamrandbereiche „Heatless liquid dam“. Lightcuring material for sealing leaky rubber dam border areas „Heatless liquid dam“.

Einzel / Individuals

3 x Spritze / syringe à 3ml

25 St./ pcs. Tips large / pink

25 St./ pcs. Tips small / grün/ green

REF 07101

REF 07102

REF 07103

Spritze 3 ml mit je 5 Tips large und small

Syringe 3 ml with ea. 5 tips large and small

REF 07100S



auftragen
apply



aus härten
cure



KKD® Kofferdam Servietten/ Rubber Dam Napkins



- Halten den Kontaktbereich (Haut/Kofferdam) trocken
- absorbieren Schweiß und Speichel
- zum Schutz empfindlicher Haut
- weich und saugfähig
- keep the contact area dry (skin/rubber dam)
- maximum absorption of saliva, water and perspiration
- protect even sensitive skin
- smooth and absorbent

Für alle Rahmen geeignet/ Suited for all frames

50 St./ pcs.

REF 07055

Kofferdam Gleitmittel/ Rubber Dam Lubricant



Erleichtert das Applizieren des Kofferdams und lässt die Kofferdamsepten besser durch die Kontaktzonen gleiten. Das Gleitmittel ist wasserlöslich und lässt sich rückstandslos mit Wasserspray entfernen.


For easy application of the rubber dam and for better gliding of rubber dam septums through contact areas. The lubricant is water soluble. Can be easily removed with water spray without leaving any residues.

4 Tuben à 5 g/ 4 tubes à 5 g

REF 00741

Kofferdam Leitfaden/ Rubber Dam Instruction Manual

Zeigt für wesentliche Indikationsfälle Anwendungsbeispiele und die ausführliche Beschreibung mit bildlicher Darstellung.
 Examples of use and detailed description with pictures
 REF 05600


 Kofferdamkurse und -Schulungen auf Anfrage –
 Info unter info@kkd-topdent.de
 Rubber Dam courses and trainings on request –
 more information at info@kkd-topdent.de




Anwendungsfilme/ Films "How to use"

*für mobile
 Endgeräte
 for mobile
 devices*


Anlegetechnik A - einhändig
 Placing rubber dam
 technique A single-handed

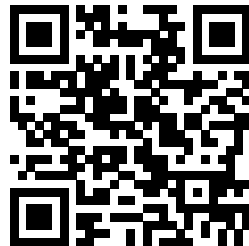


Anlegetechnik B - zweihändig
 Placing rubber dam
 technique B two-handed

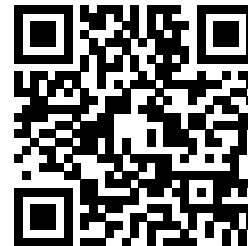


Anlegetechnik C - Einzelzahn Endo
 Placing rubber dam
 technique C - single tooth ENDO

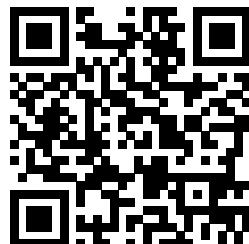


Anwendung DamFix
 How to use DamFix

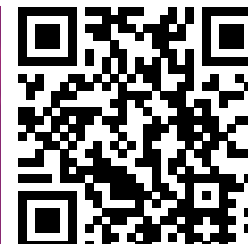

Anwendung Heidemann-Spatel
 How to use Spatula Heidemann

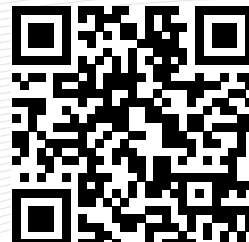

Anwendung Metzenbaum-Schere
 How to use Metzenbaum-Scissors

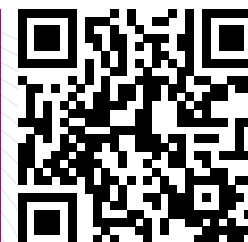


Neue Hallerklammer nach Dr. Landenberger
New Haller Clamp by Dr. Landenberger



Neue Hallerklammer
New Haller Clamp
REF 52200

ZiN Beschichtung/ coating
Zirkonnitrid/ Zirconium-Nitride

Oberflächen-Beschichtung
mit verschiedenen Farben/
coating in different colors

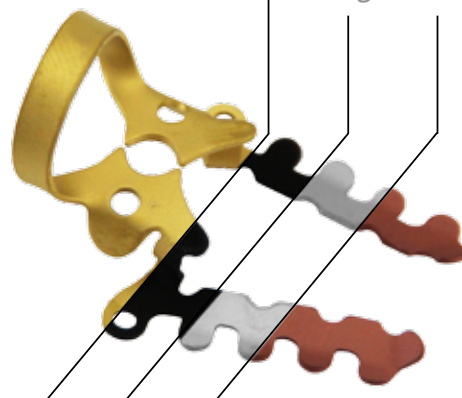

Vorbereitung zur Füllung.
Retraktion des Kofferdams durch
aufgespannte Elastics
Zahn 46
filling preparation.
Retraction of rubber dam by
elastics placed over the spikes of
the clamp, tooth 46



Trockenlegung 2. Quadrant, Vor-
bereitung zur Füllung Zahn 26
Isolation of upper left quadrant,
tooth 26




Dentinadhäsive Unterfüllung,
Zahn 36
Adhesive base, tooth 36



Konditionierung einer Kavität, Zahn 45
Conditioning of a cavity, tooth 45

- Abhaltung von Zunge und Wange
 - Fixierung von Watterollen
 - Retraktion der Gingiva
 - Trockenhaltung des Arbeitsfeldes
 - Trockenhaltung bei allen Aufgaben der adhäsiven Zahnheilkunde
 - Erleichterung bei der Delegation
 - Arbeiten ohne Assistenz möglich
 - Verbesserung beim optischen Abdruck (Cerec)
- retraction of tongue and cheek
 - fixation of cotton rolls
 - retraction of the gingiva
 - for keeping the operating field dry
 - for restorations using adhesive bonding techniques
 - working without assistance is possible
 - improvement of the optical impression (Cerec)

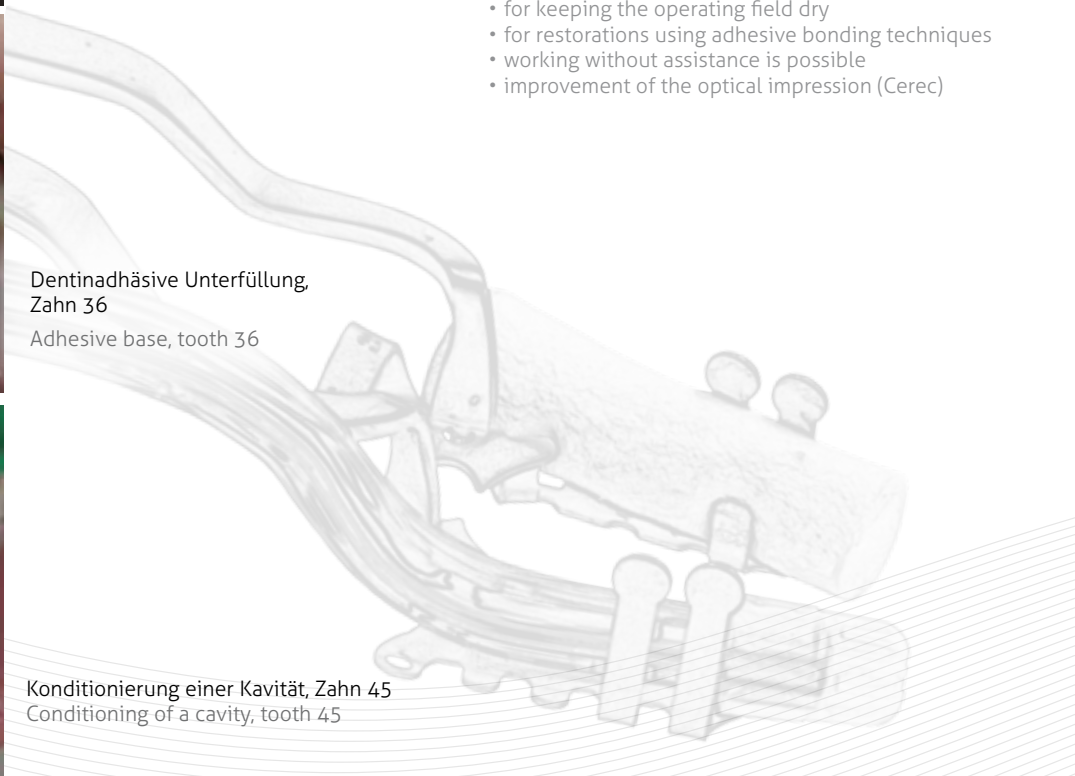

... und ihre Varianten | ... and its variants



Lieferformen/
presentation

2AO



REF 52201

2AUR



REF 52198

2AUL



REF 52197

Pärchen/ pair

2AUR/2AUL



REF 52191S

Gold (ZiN)
gold

Schwarz
black



REF 52201B



REF 52198B



REF 52197B



REF 52191BS

Silber
silver



REF 52201C



REF 52198C



REF 52197C



REF 52191CS

Rot
red



REF 52201R



REF 52198R



REF 52197R



REF 52191RS

Standard Set/ Standard Kit

Alle 4 Klammern - goldfarben, ZiN-beschichtet

All 4 clamps - gold, ZiN-coated

REF 52196S

Anwendungsfilme Hallerklammer und ihre Varianten/

Films "How to use" Haller clamp and its variants



<http://kkd-online.de/Hallerklammer1>



<http://kkd-online.de/Hallerklammer2>



<http://kkd-online.de/Hallerklammer3>



<http://kkd-online.de/Hallerklammer4>





... oder stellen Sie sich Ihr individuelles Set zusammen!
... or create your own individual set!

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH
Mühlgraben 36
73479 Ellwangen / Jagst

Telefon: +49 (7961) 9073-0
Fax: +49 (7961) 52031

e-Mail: info@kkd-topdent.de

CE

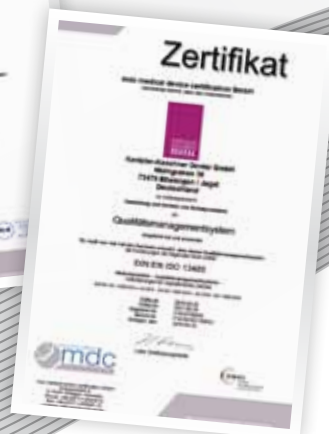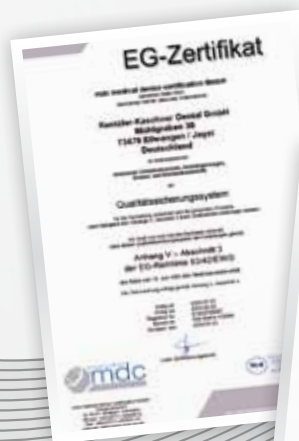

Gemeinsam für gesunde Zähne!
Together for healthy teeth!

www.kkd-online.de